

УСТАНОВКА И ЗАПУСК

1С:МЕДИЦИНА. КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

«1С:Медицина. Клиническая Лаборатория» представляет собой самостоятельное прикладное решение, использующее платформу «1С:Предприятие 8.3». Существуют также ранние версии конфигурации для платформы «1С:Предприятие 8.2».

Прикладное решение функционирует в режиме управляемого приложения. Рекомендуемое минимальное разрешение экрана монитора при работе составляет 1024x768.

В поставку «1С:Медицина. Клиническая Лаборатория» входят две информационные базы (далее – ИБ), имеющие одинаковую конфигурацию: основная и демонстрационная. Основная ИБ предназначена для сопровождения деятельности медицинской лаборатории. Демонстрационная ИБ содержит данные тестового медицинского учреждения и позволяет практически показать возможности прикладного решения «1С:Медицина. Клиническая лаборатория». Также демонстрационную базу рекомендуется использовать при обучении новых пользователей.

Для работы с системой необходимо произвести ее установку. Порядок установки системы и типовой конфигурации подробно описан в книге «1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора», входящей в комплект поставки. В книге излагается порядок установки программных продуктов и их запуск в различных режимах.

После завершения установки будут созданы два шаблона, в которых размещены файлы основной и демонстрационной ИБ. Они в списке окна запуска «1С:Предприятие» имеют наименования «Клиническая лаборатория (демо)» и «Клиническая лаборатория» соответственно.

Если в информационной базе не задан список пользователей, то при запуске конфигурации в режиме управляемого приложения вход в систему будет выполнен автоматически.

Если же в информационной базе существует список пользователей, система предложит ввести имя пользователя и пароль. По кнопке **ОК** выполняется вход в систему. По кнопке **Отмена** можно отказаться от запуска.


Для начала работы с системой «1С:Предприятие» в режиме веб-клиента следует ввести URL-адрес информационной базы в адресную строку браузера. Подробнее настройка браузера описана в книге «1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора».

Важно! Рекомендуется при первом запуске системы произвести заполнение начальных данных, так как данная процедура может существенно сократить объем дальнейших работ по настройке «1С:Медицина. Клиническая лаборатория».

При первом запуске система предложит пользователю произвести первоначальное заполнение информационной базы. Предусмотрено заполнение следующих справочников:

- **Виды исследований;**
- **Аналиты;**
- **Типы анализаторов;**
- **Методики;**
- **Референтные интервалы;**
- **Экземпляры анализаторов.**

При первом запуске системы открывается окно **Заполнение начальных данных**, см. рисунок ниже.

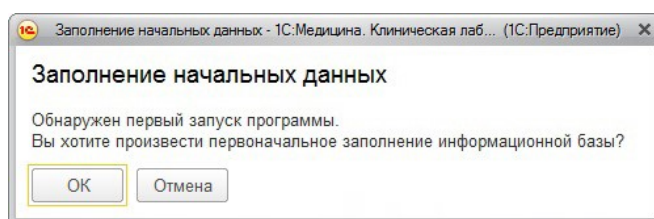

Процедура заполнения справочников производится по кнопке **ОК**. По окончании процедуры заполнения нужно нажать кнопку **Заккрыть**.